



ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ



Μ. Αλεξάνδρου 37, Ανατολή, 45221 Ιωάννινα
Τηλ.: +30(0)2651094777 Fax: +30(0)2651094708
marketing@biogenesys.gr
www.biogenesys.gr



**ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ
ΜΕ ΠΡΟΣΘΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ**



Code	Description	Size
SMA 12-05	SMART POLYETHYLENE MOBILE DISK	12-05
SMA 12-06	SMART POLYETHYLENE MOBILE DISK	12-06
SMA 12-07	SMART POLYETHYLENE MOBILE DISK	12-07
SMA 12-08	SMART POLYETHYLENE MOBILE DISK	12-08

Code	Description	Size
BLD41214	BOLD SPINAL STABILIZATION CERVICAL PEEK CAGE WITH KNIFE	4x12x14
BLD51214	BOLD SPINAL STABILIZATION CERVICAL PEEK CAGE WITH KNIFE	5x12x14
BLD61214	BOLD SPINAL STABILIZATION CERVICAL PEEK CAGE WITH KNIFE	6x12x14
BLD71214	BOLD SPINAL STABILIZATION CERVICAL PEEK CAGE WITH KNIFE	7x12x14
BLD81214	BOLD SPINAL STABILIZATION CERVICAL PEEK CAGE WITH KNIFE	8x12x14


Αυχενικός κινητός δίσκος

Πρόθεση για την αντικατάσταση αυχενικού δίσκου, κατασκευασμένη από κράμα τιτανίου, με ενδιάμεσο υλικό από πολυαιθυλένιο, χρησιμοποιείται με στόχο τη διατήρηση της κίνησης. Επιτρέπει όλες τις κινήσεις της κάμψης, της έκτασης και της περιστροφής. Διαθέτει ακτινοσκοπικούς δείκτες τιτανίου για ακτινοσκοπικό έλεγχο. Έχει οδοντωτές επιφάνειες για την σταθεροποίηση του ανάμεσα στους σπονδύλους.

Αποτελείται από δύο πλάκες και ένα κινητό έδρανο.

Διαθέτει stop κίνησης και το σχήμα του είναι κυλινδρικό, η επιφάνεια των δύο πλακών ενδείκνυται να γίνεται Οστεοποίηση.

Η Εταιρεία διαθέτει
ΣΕΤ ΔΙΑΣΤΟΛΕΩΝ

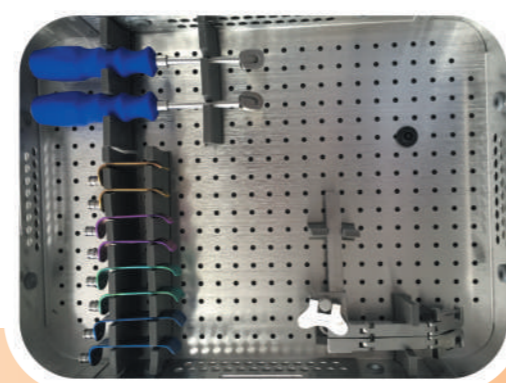

Αυχενικός κλωβός

Πρόσθιος αυχενικός αυτασφαλιζόμενος κλωβός, BOLD, κατασκευασμένος από PEEK. Είναι κεκλιμένος και ανατομικός, με άνω και κάτω επιφάνειες, οδοντωτές και με σύστημα πτερυγίου-λάμας για επιπλέον ασφάλεια. Παρέχει διπλή στήριξη, στον υπερκείμενο και τον υποκείμενο σπόνδυλο, με μηδενικό προφίλ. Αντικαθιστά την αυχενική πλάκα, μειώνει τον χειρουργικό χρόνο και συντομεύει τη διάρκεια.

Ο κλωβός BOLD διαθέτει ακτινοσκοπικούς δείκτες τιτανίου για ακτινοσκοπικό έλεγχο. Για τη μείωση της διάβρωσης και του συντελεστή τριβής της κινητικότητας της πρόθεσης, καλύπτεται με ειδικό κράμα. Η τοποθέτηση και η διαδικασία σταθεροποίησης γίνεται με ένα μόνο εργαλείο πρόθεσης: (+, -) 10 μοίρες κάμψη / έκταση, (+, -) 10 μοίρες εγκάρσιας κάμψης και δομή που επιτρέπει την περιστροφή κατά (+, -) 8 βαθμούς.

Διαθέσιμα σε πολλές επιλογές μεγέθους Βάθος 12, 14 mm, πλάτος 14 mm και ύψη 4-8 mm.

Αποστειρωμένα, σε διαφανή, εύπλαστη πλαστική σακούλα από χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ΕΟ και γ-αποστείρωση. Συνοδεύεται από πλήρες σετ εργαλείων.